


GerroBed Flex



SCHWERLASTBETT
mit Seitenlagerungsfunktion
für bariatrische Patienten

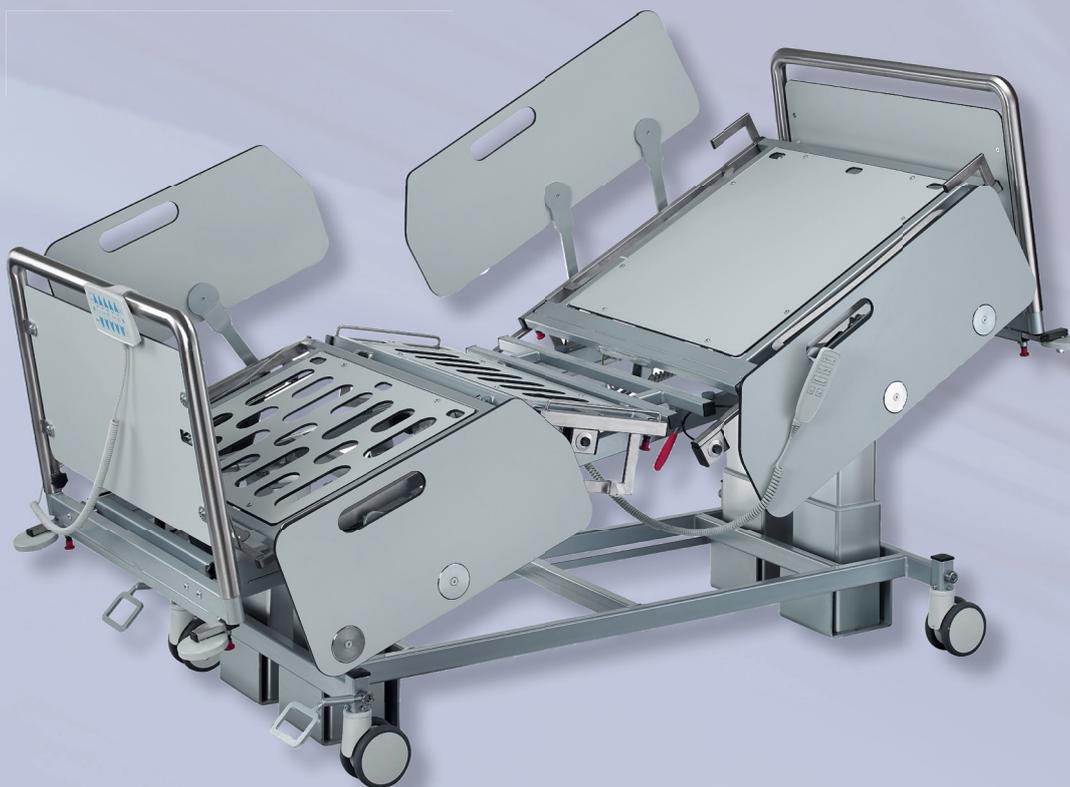

INDIVIDUELLE UND
BEDARFSGERECHTE
VERSORGUNG
BARIATRISCHER
PATIENTEN

PATIENTENGEWICHT
BIS 400 KG

PFLEGEERLEICHTERUNG
DURCH ELEKTRISCH
EINSTELLBARE
SEITENLAGERUNG BIS 15°

LIEGEFLÄCHENVER-
BREITERUNG BIS 120 CM
MIT 90 CM MINDESTBREITE
FÜR DEN LEICHTEREN
TRANSPORT

RÖNTGENFÄHIG

OPS-CODIERBAR
(8-390.5)

PFLEGEERLEICHTERUNG – LAGERUNG – FLEXIBILITÄT

FUNKTIONEN

- Elektrisch einstellbare Seitenlagerung bis 15° erleichtert pflegerische Maßnahmen und unterstützt die Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Laterale Seitenlagerung erleichtert das Aufstehen und die Mobilisation des Patienten
- Manuelle Verbreiterung der Liegefläche bis 120 cm
- Manuelle Verlängerung der Liegefläche bis 220 cm
- Zusätzliche CPR-Hebel zur manuellen Notabsenkung des Rückenteils
- Herzstuhlposition und weitere gängige Positionen mit nur einem Knopfdruck
- Röntgendurchlässiges Rückenteil
- Absenkbare Seitenblenden als Ausstiegshilfe und zur Mobilisation
- Sperren einzelner Funktionen am Patientenhandschalter möglich
- Vielfältige Vorrichtungen zur Zubehöranbringung
- Batteriebackup

STANDARD

- Ausstattung mit Visko-Schwerlastmatratze

OPTIONAL

- Patientenaufrichter am Bett
- Ausstattung mit NoDec® Bari Wechseldrucksystem oder Low-Air-Loss System

TECHNISCHE DATEN

Liegefläche Maße	Breite: manuell von 90 – 120 cm Länge: manuell von 200 – 220 cm
Außenmaße	Breite: 101 – 131 cm Länge: 213 – 238 cm
Höhenverstellung der Liegefläche	Elektrisch von 43 – 76 cm
Matratzenabmessungen	Breite: 90 bis 120 cm Länge: 200 bis 220 cm
Max. laterale Rotation	ca. 15° / 15°
Sichere Arbeitslast	435 kg
Patientengewicht	bis 400 kg

© 2023 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.
Stand der Informationen: Mai 2023

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO13485:2016



G/PM/DB/GBF/2023-05